


FASCIA POLAR EQUINE

Guida introduttiva

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY

1. CONTENUTO DEL SET

1. **Fascia:** gli elettrodi in plastica (A, B) sul retro della fascia rilevano la frequenza cardiaca. La tasca (C) protegge il sensore di frequenza cardiaca da urti e graffi ed evita che la fascia cada.
2. **Sensore di frequenza cardiaca:** il sensore di frequenza cardiaca invia il segnale di frequenza cardiaca al training computer.

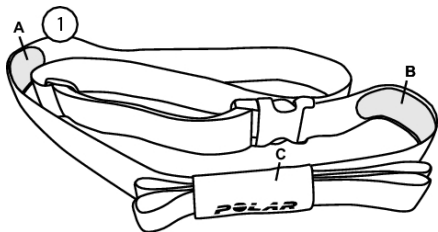

È possibile scaricare il manuale d'uso in tedesco, francese, italiano, spagnolo, finlandese e svedese dal sito www.polar.com/support.

Per i tutorial video, andare al sito http://www.polar.com/en/polar_community/videos.



2. POSIZIONAMENTO DELLA FASCIA

1. Affinché il sensore di frequenza cardiaca possa leggere correttamente la frequenza cardiaca, garantire un buon contatto tra gli elettrodi in plastica e la pelle del cavallo. Inumidire adeguatamente la fascia, ad esempio in un secchio di acqua (1).
2. Bagnare anche la criniera del cavallo dalle aree in cui sono collocati gli elettrodi della fascia (2). Se il cavallo ha una criniera lunga o folta, è possibile legarla. In tal modo si migliora nettamente la qualità del segnale di frequenza cardiaca.
3. Agganciare il sensore di frequenza cardiaca alla tasca (3). Chiudere saldamente la tasca.




4. Posizionare la fascia come indicato (4), con la tasca del sensore di frequenza cardiaca sul lato sinistro del cavallo. In tal modo, si garantisce che gli elettrodi della fascia siano in posizione corretta.

Per ottimizzare il contatto tra la pelle del cavallo e gli elettrodi, è possibile utilizzare gel di contatto sugli elettrodi. Si ottiene un migliore rilevamento della frequenza cardiaca del cavallo. Applicare il gel sugli elettrodi situati sul retro della fascia.

La portata del sensore della frequenza cardiaca è superiore a 10 m. Pertanto, è possibile monitorare la frequenza cardiaca del cavallo anche durante il lavoro alla corda.



*Per il video, andare al sito http://www.polar.com/en/polar_community/videos.
Per le istruzioni sulla visualizzazione della frequenza cardiaca dei cavalli e la registrazione di una sessione di allenamento, consultare il manuale d'uso del training computer. È possibile scaricare il manuale d'uso dal sito www.polar.com/support.*

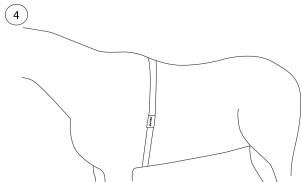

3. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Cura e manutenzione

Attenersi alle istruzioni per la cura al fine di garantire una misurazione affidabile e ottimizzare la durata della fascia e del sensore di frequenza cardiaca. Le seguenti istruzioni consentono di attenersi alle condizioni specificate nella garanzia.

Sensore di frequenza cardiaca: Scollegare il sensore di frequenza cardiaca dalla fascia dopo ogni utilizzo e asciugarlo con un panno morbido. Pulire il sensore di frequenza cardiaco con una soluzione di acqua e sapone neutro, qualora necessario. Non utilizzare mai alcool o materiali abrasivi (ad esempio, lana di vetro o prodotti chimici).

Fascia: alla fine di ogni allenamento, risciacquare la fascia sotto acqua corrente e appenderla. Pulire la fascia con cura con una soluzione di acqua e sapone neutro, qualora necessario. Non utilizzare saponi idratanti in quanto possono lasciare residui sulla fascia. Non lasciare in ammollo la fascia, non stirarlo, non lavarlo a secco e non candeggiarlo. Non

estendere bruscamente la fascia e non piegare gli elettrodi.

Per ottimizzare la durata della batteria del sensore di frequenza cardiaca, asciugare e conservare separatamente fascia e sensore di frequenza cardiaca. Conservare il sensore di frequenza cardiaca in un luogo fresco e asciutto. Per evitare l'ossidazione dello scatto, non conservare il sensore di frequenza cardiaca bagnato in un materiale non traspirante, quale una borsa sportiva. Non esporre il sensore di frequenza cardiaca ai raggi diretti del sole per lunghi periodi.

Assistenza

Durante il periodo di garanzia di 12 mesi, si consiglia di rivolgersi esclusivamente al Centro di Assistenza Tecnica Polar autorizzato per interventi diversi dalla sostituzione della batteria. La garanzia non copre danni provocati o conseguenti ad una errata assistenza se eseguiti da personale non autorizzato Polar Electro. Per le informazioni di contatto e tutti gli indirizzi relativi ai Centri di Assistenza

Tecnica Polar, visitare il sito www.polar.com/support e i siti web specifici per ogni Paese.

Garanzia

Garanzia Internazionale limitata Polar per prodotti Equine

- I prodotti Polar Equine sono sviluppati e realizzati per l'uso negli sport equini. Ogni prodotto viene sottoposto a rigorosi test prima di uscire dalla fabbrica.
- La presente garanzia non esclude alcun diritto statutario del consumatore, ai sensi delle leggi nazionali o regionali in vigore, e nessun diritto del consumatore nei confronti del rivenditore derivante dal relativo contratto di vendita/acquisto.
- La presente Garanzia Internazionale limitata Polar è rilasciata da Polar Electro Inc. ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto negli Stati Uniti o in Canada. La presente Garanzia Internazionale limitata Polar è rilasciata da Polar Electro Inc. ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto in altri Paesi.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantisce all'acquirente/al consumatore originale di questo prodotto che esso è privo di difetti di

fabbricazione e nei materiali, per due (12) mesi dalla data di acquisto.

- Conservare lo scontrino fiscale!
- La presente garanzia non copre la batteria, normale usura, i danni derivanti da cattivo uso, uso improprio, incidenti, mancata osservanza delle dovute precauzioni, manutenzione inadeguata, rottura o lesione della cassa/dei display, modifica o alterazione dei prodotti o dei relativi componenti e fascia degli elettrodi ed elastico dei sensori.
- La presente garanzia non copre i danni, le perdite, i costi o le spese, diretti, indiretti o accessori, derivanti dal prodotto o a esso riconducibili.
- I prodotti acquistati di seconda mano non sono coperti dalla garanzia, se non stipulato diversamente dalle normative locali.
- Durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto sarà riparato o sostituito presso i Centri di Assistenza autorizzati Polar indipendentemente dal Paese in cui si è effettuato l'acquisto.

La garanzia relativa a qualsiasi prodotto sarà limitata ai Paesi in cui il prodotto è stato inizialmente commercializzato.

Le informazioni normative sono disponibili sul sito www.polar.com/support.



La figura del contenitore di spazzatura mobile barrato con la croce indica che i prodotti Polar sono dispositivi elettronici contemplati dalla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), mentre batterie e accumulatori usati in questi prodotti contemplati dalla Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 su batterie e accumulatori e sul loro smaltimento. Pertanto, nei Paesi europei si deve provvedere allo smaltimento differenziato di questi prodotti e di batterie/accumulatori contenuti nei prodotti Polar.



Questo marchio indica che il prodotto è protetto da scosse elettriche.

Copyright © 2012 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy possiede la certificazione ISO 9001:2008.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere utilizzata o riprodotta in qualsiasi forma o mezzo senza il permesso scritto della Polar Electro Oy. I nomi e i loghi di questo manuale o degli imballaggi contrassegnati con la sigla ® sono marchi di fabbrica registrati di Polar Electro Oy.

Clausola esonerativa di responsabilità

Le presenti condizioni di garanzia si applicano ai prodotti Polar Equine al posto di altre condizioni di garanzia Polar Electro, anche se in qualche documentazione del prodotto potrebbero apparire altre condizioni.

Manufactured by

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

www.polar.fi

POLAR®

LISTENS TO YOUR BODY