


POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK

Kurzanleitung

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY

1. BESTANDTEILE DES PRODUKTS

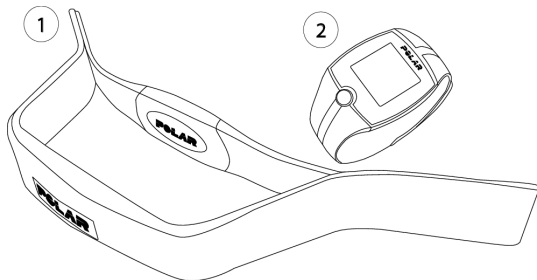



1. **T31 Sender mit einem Lenker:** Der Sender überträgt das Herzfrequenz-Signal EKG-genau an den Trainingscomputer.
2. **FT1 Trainingscomputer:** Der Trainingscomputer zeigt die Herzfrequenz an.



Sie können die Gebrauchsanleitung in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Finnisch und Schwedisch unter www.polar.com/support herunterladen.

Video-Lernprogramme finden Sie unter http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

2. VERWENDUNG DES FT1 HEALTHCHECK

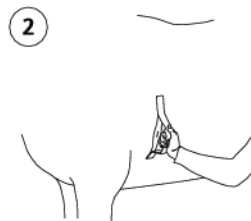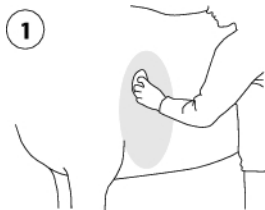

1. Befeuchten Sie das Haar des Pferdes ausgiebig wie angegeben (1). Sie können auch Elektroden-Kontaktgel verwenden.
2. Bringen Sie den Sender auf dem Haar des Pferdes an (2). Der FT1 Trainingscomputer sollte sich nicht weiter als 1 Meter vom Sender entfernt befinden.
3. Drücken Sie die Taste, um die Übertragung zu starten. Die Herzfrequenz Ihres Pferdes wird innerhalb von 5 Sekunden angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste, um die Übertragung zu beenden.

3. FEHLERBEHEBUNG

Fehlerhafte Herzfrequenz-Messwerte

- Stellen Sie sicher, dass der Sender fest am Pferd anliegt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Haar des Pferdes ausreichend befeuchtet ist.
- Angesammelter Schweiß und Schmutz können die Messung der Herzsignale durch den Sensor beeinträchtigen. Prüfen Sie, ob der Sender gereinigt werden muss.
- Wenn die Herzfrequenz-Messung trotzdem nicht funktioniert, könnte die Batterie des Sensors oder Trainingscomputers entladen sein. Wir empfehlen, die Batterie von der Polar Serviceabteilung überprüfen zu lassen. Wenden Sie sich wegen näherer Informationen an Ihren Händler.



Ein Video-Lernprogramm zur Verwendung von FT1 Healthcheck finden Sie unter http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

4. WICHTIGE INFORMATIONEN

Pflege und Wartung

Befolgen Sie die Pflegeanweisungen, um eine zuverlässige Herzfrequenz-Messung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Senders und Trainingscomputers zu verlängern. Die folgenden Hinweise werden Ihnen dabei helfen, die Garantiebedingungen zu erfüllen.

Bewahren Sie den Sender und den Trainingscomputer an einem kühlen und trockenen Ort auf. Lagern Sie sie nicht in einer feuchten Umgebung oder einer nicht atmungsaktiven Tasche (z. B. einer Plastiktüte oder einer Sporttasche) oder zusammen mit leitfähigem Material wie einem nassen Handtuch. Setzen Sie das komplette Set nicht über einen längeren Zeitraum starker Sonnenstrahlung aus. Reinigen Sie den Trainingscomputer mit einer Lösung aus milder Seife und

Wasser. Trocknen Sie ihn mit einem Handtuch ab. Verwenden Sie niemals Alkohol und keine scheuernden Materialien wie Stahlwolle oder chemische Reinigungsmittel. Vermeiden Sie es, den Sender zu verbiegen oder stark zu dehnen. Dies kann die Elektroden beschädigen. Drücken Sie unter laufendem Wasser keine Taste am Trainingscomputer.

Service

Wir empfehlen Ihnen, während der einjährigen Garantiezeit die Wartung und Reparaturen nur von der Polar Serviceabteilung durchführen zu lassen. Schäden und Folgeschäden, die durch nicht von Polar Electro autorisiertes Personal verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Kontaktinformationen und die Adressen aller Polar Serviceabteilungen finden Sie unter www.polar.fi/support und auf den länderspezifischen Websites.

Garantie

Weltweite Garantie des Herstellers für Equine Produkte

- Polar Equine Produkte werden für den Einsatz im Pferdesport entwickelt und hergestellt. Jedes Produkt wird strengen Tests unterzogen, bevor es das Werk verlässt.
- Diese Garantie schränkt weder die gesetzlichen Rechte des Kunden nach dem jeweils geltenden nationalen Recht noch die Rechte des Kunden gegenüber dem Händler aus dem zwischen beiden geschlossenen Kaufvertrag ein.
- Diese weltweite Garantie gewährt Polar Electro Inc. Kunden, die dieses Produkt in den USA oder Kanada gekauft haben. Diese weltweite Garantie gewährt Polar Electro Inc. Kunden, die dieses Produkt in anderen Ländern gekauft haben.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. gewährt dem Erstkunden/Erstkäufer dieses Geräts eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum bei Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.
- Die Quittung, die Sie beim Kauf des Produktes erhalten haben, ist Ihr Kaufbeleg!
- Von der Garantie ausgeschlossen sind: Batterien, normaler Verschleiß, Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall oder unsachgemäße Handhabung sowie mangelhafte Wartung. Ausgenommen von der Garantie sind auch gesprungene oder zerkratzte Gehäuse/Displays, modifizierte oder veränderte Produkte und ihre Teile sowie der Elektrodengurt und Gurte von Sensoren.

- Die Garantie deckt keine Schäden oder Folgeschäden, Verluste, entstandene Kosten oder Ausgaben, die mittelbar oder unmittelbar mit der Benutzung der Polar Produkte in Zusammenhang stehen.
- Gebrauchte gekaufte Produkte sind von der Garantie nicht gedeckt, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben wird.
- Während der Garantiezeit wird das Produkt bei Fehlern von der Polar Serviceabteilung kostenlos repariert oder ersetzt, unabhängig von dem Land, in dem das Produkt erworben wurde.

Die Garantie für alle Produkte beschränkt sich auf die Länder, in denen das Produkt ursprünglich vermarktet wurde.

Rechtliche Hinweise finden Sie unter www.polar.com/support.



Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt gegen Stromschläge geschützt ist.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Polar Produkte Elektrogeräte sind, die der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte unterliegen. Batterien und Akkumulatoren in den Produkten unterliegen der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Alttakkumulatoren. In EU-Ländern sind diese Produkte und Batterien/Akkumulatoren in Polar Produkten folglich getrennt zu entsorgen.

© 2012 Polar Electro Oy, FI-90440
KEMPELE.

Polar Electro Oy ist ein nach ISO
9001:2008 zertifiziertes Unternehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Diese
Gebrauchsanleitung darf ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Polar Electro
Oy weder anderweitig verwendet noch
kopiert werden, auch nicht auszugsweise.
Die mit dem ®-Symbol gekennzeichneten
Namen und Logos in dieser
Gebrauchsanleitung oder dem
Produkt-Set sind eingetragene Marken
von Polar Electro Oy.

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass diese
Garantiebedingungen für Polar Equine
Produkte anstelle jeglicher anderen
Garantiebedingungen von Polar Electro
gelten, auch wenn andere Bedingungen
in der Dokumentation genannt werden.

Manufactured by

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

www.polar.fi

POLAR®

LISTENS TO YOUR BODY