


POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK

Guida introduttiva

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY

1. COMPONENTI DEL PRODOTTO

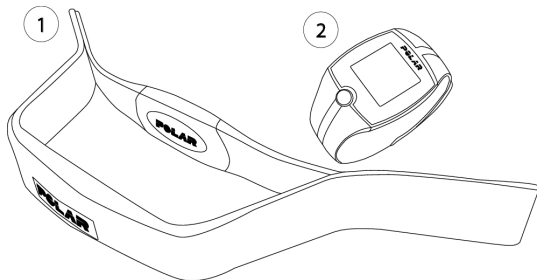



1. **Trasmettitore T31 con manubrio:** il trasmettitore invia in modo preciso il segnale della frequenza cardiaca al training computer.
2. **Training computer FT1:** il training computer visualizza la frequenza cardiaca.



Il manuale d'uso in tedesco, francese, italiano, spagnolo, finlandese e svedese è scaricabile dal sito www.polar.com/support.

Per i tutorial video, andare al sito http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

2. USO DELL'FT1 HEALTHCHECK

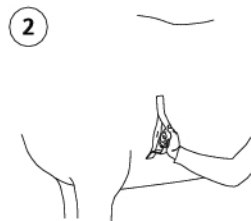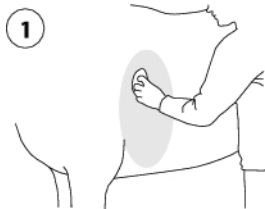

1. Bagnare abbondantemente il pelo del cavallo come indicato (1). In alternativa, è possibile utilizzare gel per elettrodi.
2. Posizionare il trasmettitore sul pelo del cavallo (2). Tenere il training computer FT1 ad una distanza di 1 metro dal trasmettitore.
3. Premere il pulsante per iniziare. La frequenza cardiaca del cavallo appare in 5 secondi.
4. Premere il pulsante per arrestare.

3. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Valori anomali di frequenza cardiaca

- Assicurarsi che il trasmettitore sia saldamente a contatto con il cavallo.
- Assicurarsi che il pelo del cavallo sotto gli elettrodi sia bagnato adeguatamente.
- L'accumulo di sudore e di sporcizia potrebbe interferire con la misurazione del segnale dal cuore al trasmettitore. Verificare se è necessario pulire il trasmettitore.
- Se la misurazione della frequenza cardiaca non funziona ancora, è possibile che la batteria del trasmettitore o del training computer sia esaurita. Per il controllo della batteria, rivolgersi al personale di assistenza tecnica Polar autorizzato. Per i dettagli, rivolgersi al distributore/rivenditore.



Per il tutorial video sull'uso dell'FT1 Healthcheck, andare al sito http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

4. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Cura e manutenzione

Attenersi alle istruzioni per la cura al fine di garantire una misurazione affidabile e ottimizzare la durata del trasmettitore e del training computer. Le seguenti istruzioni consentono di attenersi alle condizioni specificate nella garanzia.

Riporre il trasmettitore e il training computer in un luogo fresco e asciutto. Non conservarli in un luogo umido, in un materiale non traspirante (quale una busta di plastica o borsa sportiva) o in un materiale conduttivo (quale un panno bagnato). Non esporre ai raggi diretti del sole per lunghi periodi. Lavare utilizzando una soluzione di acqua e un detergente delicato e asciugare con un panno. Non utilizzare mai alcool o materiali abrasivi

(lana di vetro o prodotti chimici). Non tendere e non piegare il trasmettitore. Ciò potrebbe danneggiare gli elettrodi. Non premere il pulsante del training computer sotto acqua corrente.

Assistenza

Durante il periodo di garanzia di 12 mesi, si consiglia di rivolgersi esclusivamente al Centro di Assistenza Tecnica Polar autorizzato. La garanzia non copre danni provocati o conseguenti ad una errata assistenza se eseguiti da personale non autorizzato Polar Electro. Per le informazioni di contatto e tutti gli indirizzi relativi ai Centri di Assistenza Tecnica Polar, visitare il sito www.polar.fi/support e i siti web specifici per ogni Paese.

Garanzia

Garanzia Internazionale limitata Polar per prodotti Equine

- I prodotti Polar Equine sono sviluppati e realizzati per l'uso negli sport equini. Ogni prodotto viene sottoposto a rigorosi test prima di uscire dalla fabbrica.
- La presente garanzia non esclude alcun diritto statutario del consumatore, ai sensi delle leggi nazionali o regionali in vigore, e nessun diritto del consumatore nei confronti del rivenditore derivante dal relativo contratto di vendita/acquisto.
- La presente Garanzia Internazionale limitata Polar è rilasciata da Polar Electro Inc. ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto negli Stati Uniti o in Canada. La presente Garanzia Internazionale limitata Polar è rilasciata da Polar Electro Inc. ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto in altri Paesi.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantisce all'acquirente/al consumatore originale di questo prodotto che esso è privo di difetti di fabbricazione e nei materiali, per dodici (12) mesi dalla data di acquisto.
- Conservare lo scontrino fiscale!
- La presente garanzia non copre la batteria, normale usura, i danni derivanti da cattivo uso, uso improprio, incidenti, mancata osservanza delle dovute precauzioni, manutenzione inadeguata, rottura o lesione della cassa/dei display, modifica o alterazione dei prodotti o dei relativi componenti e fascia degli elettrodi ed elastico dei sensori.
- La presente garanzia non copre i danni, le perdite, i costi o le spese, diretti, indiretti o accessori, derivanti dal prodotto o a esso riconducibili.
- I prodotti acquistati di seconda mano non sono coperti dalla garanzia, se non stipulato diversamente dalle normative locali.

- Durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto sarà riparato o sostituito presso i Centri di Assistenza autorizzati Polar indipendentemente dal Paese in cui si è effettuato l'acquisto.

La garanzia relativa a qualsiasi prodotto sarà limitata ai Paesi in cui il prodotto è stato inizialmente commercializzato.

Le informazioni normative sono disponibili sul sito www.polar.com/support.



Questo marchio indica che il prodotto è protetto da scosse elettriche.



La figura del contenitore di spazzatura mobile barrato con la croce indica che i prodotti Polar sono dispositivi elettronici contemplati dalla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), mentre batterie e accumulatori usati in questi prodotti contemplati dalla Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 su batterie e accumulatori e sul loro smaltimento. Pertanto, nei Paesi europei si deve provvedere allo smaltimento differenziato di questi prodotti e di batterie/accumulatori contenuti nei prodotti Polar.

Copyright © 2012 Polar Electro Oy,
FI-90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy possiede la
certificazione ISO 9001:2008.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere utilizzata o riprodotta in qualsiasi forma o mezzo senza il permesso scritto di Polar Electro Oy. I nomi e i loghi di questo manuale o degli imballaggi contrassegnati con la sigla ® sono marchi di fabbrica registrati di Polar Electro Oy.

Clausola esonerativa di responsabilità

Le presenti condizioni di garanzia si applicano ai prodotti Polar Equine al posto di altre condizioni di garanzia Polar Electro, anche se in qualche documentazione del prodotto potrebbero apparire altre condizioni.

Manufactured by

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

www.polar.fi

POLAR®
LISTENS TO YOUR BODY