


POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK

Kom igång guide

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY

1. PRODUKTDELAR

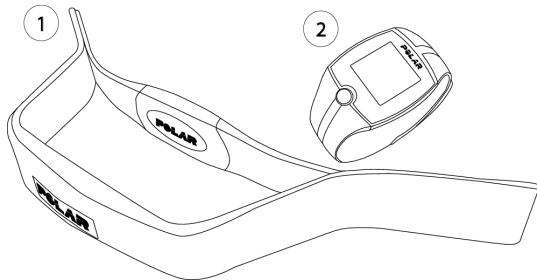



1. **T31 sändarbälte med ett styre:** Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn.
2. **FT1 träningsdator:** Träningsdatorn visar pulsen.



Bruksanvisning på tyska, franska, italienska, spanska, finska och svenska kan laddas ner från www.polar.com/support.

För videohandledning, gå till http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

2. ANVÄNDA FT1 HEALTHCHECK

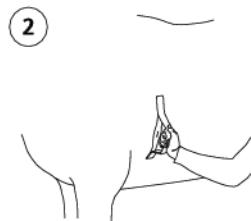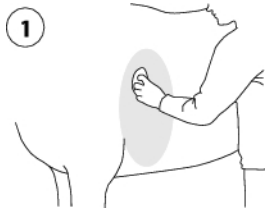

1. Blöt hästens hår rikligt enligt bilden (1). Alternativt kan du använda elektrodgel.
2. Placera sändarbältet mot hästens hår (2). Håll FT1 träningsdator inom 1 meter från sändarbältet.
3. Tryck på knappen för att starta. Hästens puls visas efter 5 sekunder.
4. Tryck på knappen för att stoppa.

3. FELSÖKNING

Onormala pulsavläsningar

- Kontrollera att sändarbältet ligger dikt an mot hästen.
- Kontrollera att hästens hår under sändarbältet är ordentligt genomfuktat.
- Svett och smuts som samlats kan störa mätningen av signalen från hjärtat till sändarbältet. Kontrollera om sändarbältet behöver rengöras.
- Om pulsmätningen fortfarande inte fungerar kan batteriet till sändarbältet eller träningsdatorn vara tomt. Låt personal från ett auktoriserat Polar Service Center kontrollera batteriet. Kontakta din distributör/återförsäljare för information.



För videohandledning om hur du använder FT1 Healthcheck, gå till http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

4. VIKTIG INFORMATION

Skötsel och underhåll

Följ skötselanvisningarna för att säkerställa tillförlitlig mätning och för att maximera sändarbältets och träningsdatorns livslängd. Följande anvisningar hjälper dig att uppfylla garantivillkoren.

Förvara sändarbältet och träningsdatorn svalt och torrt. Förvara dem inte i fuktig miljö, i tättslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (en blöt handduk). Utsätt inte för direkt solljus under längre tidsperioder. Rengör med en mild tvällösning och torka med en handduk. Använd aldrig alkohol eller

material med slipverkan (stålull eller kemikalier). Sändarbältet ska inte böjas eller sträckas. Detta kan skada elektroderna. Tryck inte på knappen på träningsdatorn under rinnande vatten.

Service

Under den 12 månader långa garantitiden rekommenderar vi att endast ett auktoriserat Polar Service Center utför service. Garantin täcker inte skador eller följskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. Besök www.polar.fi/support och landsspecifika webbplatser för kontaktinformation och alla adresser till Polar Service Center.

Garanti

Begränsad internationell Polar-garanti för Equine-produkter

- Polar Equine-produkter utvecklas och tillverkas för användning i hästsporter. Alla produkter genomgår noggranna tester innan de lämnar fabriken.
- Denna garanti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter under tillämpliga gällande nationella lagar eller delstatslagar, eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren, med avseende på försäljningsavtalet.
- Denna begränsade Polar internationella garanti utfärdas av Polar Electro Inc. till kunder som har köpt sin produkt i USA eller Kanada. Denna begränsade Polar internationella garanti utfärdas av Polar Electro Oy. till kunder som har köpt sin produkt i andra länder.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garanterar den ursprungliga innehavaren av denna produkt att produkten är fri från defekter när det gäller material eller utförande i tolv (12) månader från inköpsdatumet.
- Det ursprungliga inköpskvittot är ditt inköpsbevis!
- Garantin täcker inte batteriet, normalt slitage, skador p.g.a. felaktig användning, missbruk, olyckor eller icke efterlevnad av försiktighetsåtgärderna, felaktigt underhåll, spruckna, brutna eller repade fodral/displayer, modifierade eller ändrade produkter eller deras delar samt elektrodbältet och sensorbältet.
- Garantin täcker inte några skador, förluster, kostnader eller utgifter, direkta eller indirekta, efterföljande eller specifika, uppkomna av, eller relaterade till produkten.

- Artiklar som har köpts i andra hand omfattas inte av garantin, såvida inget annat anges i den lokala lagen.
- Under garantiperioden repareras eller ersätts produkten på något auktoriserat Polar Service Center, oavsett i vilket land produkten köptes.

Garantin med avseende på alla produkter begränsas till de länder där produkten ursprungligen marknadsfördes.

Legal information finns på www.polar.com/support.



Denna märkning visar att produkten är skyddad mot elstötar.



Den överkorsade papperskorgen visar att Polars produkter är elektroniska enheter och omfattas av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2002/96/EG om avfall från elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Batterier och ackumulatörer som används i produkter omfattas av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2006/66/EG från den 6 september 2006 om batterier och ackumulatörer och förbrukade batterier och ackumulatörer. Dessa produkter och batterier/ackumulatörer som finns i Polars produkter ska därför kasseras separat i EU-länderna. Dessa produkter och batterier/ackumulatörer som finns i Polars produkter ska därför kasseras separat i EU-länder.

Copyright © 2012 Polar Electro Oy,
FI-90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy är ett ISO 9001:2008
certifierat företag.

Med ensamrätt. Ingen del av denna
användarhandbok får användas eller
reproduceras i någon form eller på något
sätt utan föregående skriftligt tillstånd
Polar Electro Oy. Namn och logotyper
märkta med en ®-symbol i denna
användarhandbok eller i förpackningen
till denna produkt är varumärken som
tillhör Polar Electro Oy.

Ansvarsfriskrivning

Observera att dessa garantivillkor gäller
för Polar Equine-produkter istället för
övriga garantivillkor från Polar Electro,
även om andra villkor anges i någon
produktokumentation.

Manufactured by

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

www.polar.fi

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY