


POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK

Pikaopas

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY

1. TUOTTEEN OSAT

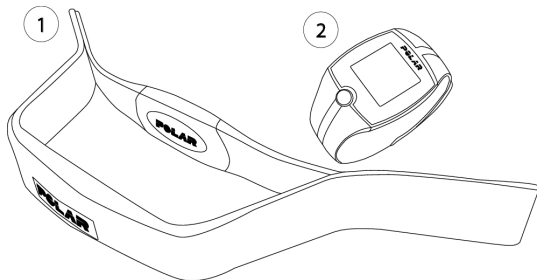



1. **T31-lähetin ja kahva:** lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle.
2. **FT1-harjoitustietokone:** harjoitustietokone näyttää sykkeen.



Käyttöohje on ladattavissa saksaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, suomeksi ja ruotsiksi osoitteesta www.polar.fi/fi/tuki.

Katso videoita osoitteessa http://www.polar.fi/fi/polar_yhteiso/vidoot.

2. FT1 HEALTHCHECK -MITTARIN KÄYTTÄMINEN

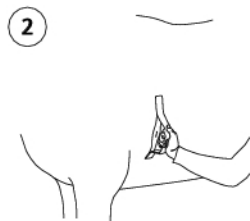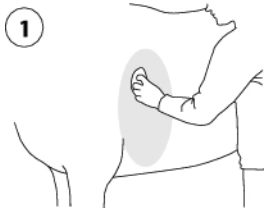

1. Kastele hevosen karvat reilusti kuvan mukaan (1). Vaihtoehtoisesti voit käyttää elektrodigeeliä.
2. Aseta lähetin hevosen karvoja vasten (2). Pidä FT1-harjoitustietokone 1 metrin sisällä lähettimestä.
3. Käynnistä mittaus painamalla painiketta. Hevosen syke tulee näyttöön 5 sekunnin kuluessa.
4. Pysäytä mittaus painamalla painiketta.

3. VIANETSINTÄ

Epänormaalit sykelukemat

- Varmista, että lähetin on tukevasti hevosta vasten.
- Varmista, että hevosen karvat on kostutettu huolellisesti lähettimen alta.
- Hiki- ja likakertymät voivat vaikuttaa lähettimen vastaanottaman sykesignaalin mittaukseen. Tarkista, onko lähettimen puhdistaminen tarpeen.
- Jos sykkeenmittaus ei edelleenkään onnistu, lähettimen tai harjoitustietokoneen paristo voi olla tyhjä. Tarkistuta paristo valtuutetussa Polar-huoltopisteessä. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.



Videotutoriaalin FT1 Healthcheck -mittarin käytöstä löydät osoitteesta http://www.polar.fi/fi/polar_yhteiso/videot.

4. TÄRKEITÄ TIETOJA

Hoito ja huolto

Voit varmistaa lähettimen ja harjoitustietokoneen mahdollisimman luotettavan mittauksen ja pitkän käyttöiän noudattamalla hoito-ohjeita. Seuraavat ohjeet auttavat täyttämään takuun edellytykset.

Säilytä lähetin ja harjoitustietokone kuivassa ja viileässä paikassa. Älä säilytä niitä kosteassa, hengittämättömässä (muovikassissa tai urheilukassissa) tai sähköä johtavassa ympäristössä (märkä pyyhe). Älä altista suoralle auringonpaisteelle pitkäksi aikaa. Puhdista ne miedolla saippualliuoksella ja kuivaa ne pyyhkeellä. Älä koskaan käytä alkoholia, puhdistuskemikaaleja tai hankaavaa materiaalia, kuten teräsvillaa.

Älä taivuta tai venytä lähetintä. Se voi vaurioittaa elektrodeja. Älä paina harjoitustietokoneen painiketta juoksevan veden alla.

Huolto

Suosittelemme, että 12 kuukauden takuun aikana laitteen huoltotoimenpiteet suoritetaan ainoastaan Polarin valtuuttamissa huoltopisteissä. Takuu ei kata valtuuttamattomasta huollosta johtuvia suoria tai välillisiä vahinkoja. Kaikkien Polar-huoltopisteiden yhteystiedot löydät osoitteesta www.polar.fi/fi/tuki sekä maakohtaisilta sivustoilta.

Takuu

Equine-tuotteiden rajoitettu kansainvälinen Polar-takuu

- Polar Equine -tuotteet on suunniteltu ja valmistettu hevosurheilukäyttöön. Kaikki tuotteet testataan huolellisesti, ennen kuin ne toimitetaan tehtaalta.
- Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan voimassa olevien asianmukaisten kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin eikä osto- tai kauppasopimukseen perustuviin kuluttajan oikeuksiin myyjään nähden.
- Polar Electro Inc. myöntää tämän rajoitetun kansainvälisen Polar-takuun asiakkaille, jotka ovat hankkineet tämän tuotteen Yhdysvalloista tai Kanadasta. Polar Electro Oy myöntää tämän rajoitetun kansainvälisen Polar-takuun asiakkaille, jotka ovat hankkineet tämän tuotteen muista maista kuin Yhdysvalloista tai Kanadasta.
- Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. takaa tämän laitteen alkuperäiselle ostajalle kahdentoista (12) kuukauden ajaksi ostopäivästä alkaen, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä.
- Alkuperäisen ostotapahtuman kuitti on ostotodistus.
- Takuu ei kata paristoa, normaalia kulumista, väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai varotoimien laiminlyönnistä aiheutuvia vaurioita, väärää huoltoa, rikkoutuneita tai naarmuuntuneita koteloita tai näyttöjä, muokattuja tai muutettuja tuotteita tai niiden osia eikä elektrodivyötä ja sensoreiden kiinnitysvyöitä.
- Tämä takuu ei kata tuotteesta aiheutuvia tai siihen liittyviä välittömiä, epäsuoria, satunnaisia tai erityisiä vaurioita, tappioita, kustannuksia tai kuluja.
- Takuu ei kata käytettynä ostettuja tuotteita, ellei paikallinen laki toisin määrää.

- Takuuajana tuote korjataan tai vaihdetaan valtuutetussa Polar-huoltopisteessä riippumatta ostomaasta.

Tuotetakuu rajoittuu maihin, joissa tuotetta on markkinoitu.

Säädöstenmukaisuustiedot löytyvät osoitteesta www.polar.fi/fi/tuki.



Tämä kuva tarkoittaa, että tuote on suojattu sähköiskuista vastaan.



Tämä pyörillä varustetun jäteastian kuva, jonka yli on vedetty rasti, tarkoittaa, että Polar-tuotteet ovat elektronisia laitteita ja kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden jätteidenkäsittelyä (WEEE) koskevan direktiivin 2002/96/EY piiriin. Tuotteissa käytetyt paristot ja akut kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston 6. syyskuuta 2006 antaman akkuja ja paristoja sekä käytettyjä akkuja ja paristoja koskevan direktiivin 2006/66/EY piiriin. Määräysten mukaan nämä Polar-tuotteet ja niissä olevat paristot/akut on EU-maissa hävitettävä erikseen.

Copyright © 2012 Polar Electro Oy,
90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy on ISO 9001:2008
-sertifioitu yritys.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa käyttää tai jäljentää missään muodossa tai millään tavoin ilman Polar Electro Oy:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Tässä käyttöohjeessa tai tuotteen pakkauksessa ®-symbolilla merkityt nimet ja logot ovat Polar Electro Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vastuunrajoitus

Huomaa, että Polar Equine -tuotteisiin sovelletaan näitä takuuehtoja muiden Polar Electro -takuuehtojen sijaan, vaikka tuotedokumentaatioissa voidaan mainita myös muita ehtoja.

Manufactured by

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

www.polar.fi

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY