
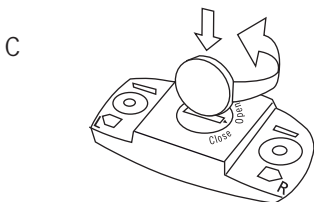
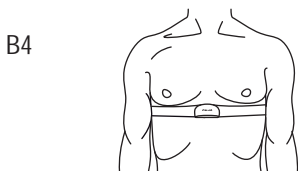
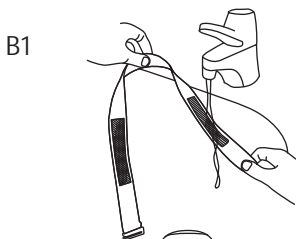


Polar WearLink®+ Hybrid

Uživatelská příručka

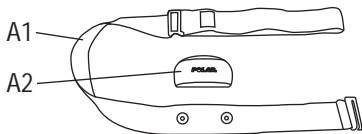

Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny pro hybridní vysílače Polar WearLink[®]+, Polar WearLink[®]+ W.I.N.D. a Polar WearLink[®]+. Model vašeho vysílače je vytištěn na konektoru.

Aktuální verzi této uživatelské příručky lze stáhnout na adrese www.polar.fi/support.

Instruktažní video naleznete na stránce www.polar.fi/en/support/video_tutorials.

Postupujte podle obrázků na předním krytu.

Součásti vysílače

1. Plochy elektrod na obrácené straně popruhu detekují tepovou frekvenci. Obrázek A1.
2. Konektor odesílá signál o tepové frekvenci do tréninkového počítače. Obrázek A2.

Noste svůj vysílač

1. Navlhčete elektrodové části popruhu pod tekoucí vodou a ujistěte se, zda jsou správně navlhčené. Obrázek B1.
2. Připevněte konektor k popruhu. Nastavte délku popruhu, aby pohodlně přiléhal. Obrázek B2.
3. Upevněte si popruh kolem hrudníku, těsně pod prsními svaly, a připevněte háček k druhému konci popruhu. Obrázek B3.
4. Zkontrolujte, zda navlhčené elektrodové části pevně přiléhají k pokožce a zda je logo společnosti Polar na konektoru ve středu a ve svislé pozici. Obrázek B4.



Po každém použití konektor od popruhu odpojte, zvýšíte tak životnost baterie ve vysílači. Pot a vlhkost pomohou udržet elektrodové části vlhké a vysílač aktivní. Tím se životnost baterie ve vysílači snižuje. Popruh po každém použití opláchněte pod tekoucí vodou.

Používání nového vysílače

Po zakoupení nového hybridního vysílače WearLink®W.I.N.D. nebo WearLink®+ je nutné jej pro měření tepové frekvence spárovat s tréninkovým počítačem.

Pokyny ke spárování vysílače s tréninkovým počítačem jsou uvedeny v uživatelské příručce k tréninkovému počítači Polar.

Použití vysílače ve vodě

Hybridní vysílače Polar WearLink®+ a WearLink®+ lze používat při vodních aktivitách, ale z následujících důvodů může docházet k interferenci:

- Voda v moři a bazénu má vysokou vodivost, elektrody se mohou zkratovat a tím se zamezí detekci signálů EKG vysílačem.
- Při skoku nebo ostrém pohybu svalů se vysílač může posunout a signály EKG nelze detekovat.
- Intenzita signálu EKG je individuální a závisí na složení tkáně.

Pro nejlepší funkci doporučujeme používat plavky a nosit vysílač pod nimi.



Vysílač Polar WearLink® W.I.N.D. je voděodolný, ale neměří tepovou frekvenci ve vodě.

Péče a údržba

Tento vysílač je vysoce moderní přístroj vyžadující pečlivé zacházení. Níže uvedené pokyny vám pomohou splnit záruční závazky.

Po každém použití odpojte konektor vysílače od popruhu. Popruh opláchněte pod tekoucí vodou. Konektor osušte jemným ručníkem. K čištění nikdy nepoužívejte alkohol nebo brusné materiály (drátěnku či chemické čisticí prostředky).

Popruh pravidelně perte v pračce při teplotě vody 40 °C/104 °F nebo alespoň po každém pátém použití. Tímto zajistíte spolehlivé měření a zvýšíte životnost vysílače. Použijte prací pytlík. Popruh nemáchejte, neždímejte, nežehlete, nepoužívejte chemická čistidla a bělidla. Nepoužívejte čisticí prací prostředky s bělidly či změkčovadly. Nikdy nedávejte konektor vysílače do pračky či sušičky!

Sušte a skladujte popruh a konektor vysílače odděleně, zvýšíte tak životnost baterie vysílače. Před dlouhodobým obdobím skladování či po použití v bazénu s vodou s vysokým obsahem chloru popruh vyperte v pračce.

Servis

Během dvouletého záručního období doporučujeme, aby servis vašeho přístroje prováděla pouze autorizovaná servisní centra Polar. Záruka nepokrývá poškození obalu či poškození v důsledku provedení servisu neautorizovaným společností Polar Electro.

Kontaktní informace a adresy všech servisních center Polar naleznete na webové stránce www.polar.fi/support a webových stránkách zastoupených v jednotlivých zemích.

Baterie

Všechny vysílače WearLink jsou vybaveny uživatelem vyměnitelnými bateriemi. Vlastní výměnu baterie proveďte podle pokynů a obrázku C na předním krytu.

1. Kryt baterie otevřete pomocí mince otáčením proti směru hodinových ručiček do polohy OPEN.
2. Dovnitř krytu vložte baterii s kladným (+) pólem směrem ke krytu. Ověřte, zda je těsnicí kroužek v drážce, aby byla zajištěna odolnost proti vodě.
3. Kryt natlačte zpět do konektoru.
4. Pomocí mince otočte kryt po směru hodinových ručiček do polohy CLOSE.

Kryt baterie otevírejte pouze při výměně baterie, aby byla zajištěna dlouhá životnost. Při výměně baterií ověřte, zda těsnicí kroužek není poškozen, v tomto případě je nutné jej vyměnit za nový.

Soupravy baterií s těsnicími kroužky jsou dostupné u prodejců a v autorizovaných servisních centrech Polar. V USA a Kanadě jsou od autorizovaných servisních center Polar k dostání další těsnicí kroužky. V USA jsou soupravy těsnicích kroužků/baterií k dostání na adrese www.shoppolar.com.



Baterie udržujte mimo dosah dětí. Při požití ihned kontaktujte lékaře. Baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

Bezpečnostní opatření

Informace pro alergiky jsou uvedeny v materiálech v technických specifikacích. Nošením vysílače na tričku, navlhčeném pod elektrodami, zamezte kožní reakci.



Kombinovaný vliv vlhkosti a intenzivního tření může způsobit sedření černé barvy z povrchu vysílače, a hrozí poskvrnění oděvů světlých barev. Pokud na kůži používáte parfém či repelent, musíte zabránit kontaktu těchto přípravků s tréninkovým počítačem nebo vysílačem.

Technické údaje

Typ baterie	CR 2025
Těsnicí kroužek baterie	O-kroužek 20,0 x 1,0 materiál FPM
Životnost baterie Polar WearLink®+	700 hodin používání
Životnost baterie Polar WearLink®+ W.I.N.D.	2000 hodin používání
Životnost baterie Polar WearLink®+ Hybrid	600 hodin používání
Provozní teplota	14 °F až 122 °F / -10 °C až +50 °C
Materiál konektoru	Polyamid
Materiál popruhu	35 % polyester, 35 % polyamid, 30 % polyuretan

Omezená mezinárodní záruka Polar Guarantee

- Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele v rámci příslušného národního práva, ani na zákonná práva spotřebitele proti prodejci, která vyplývají z kupní/prodejní smlouvy.
- Tato omezená mezinárodní záruka Polar Guarantee byla vydána společností Polar Electro Inc. pro spotřebitele, kteří si zakoupili tento produkt v USA či Kanadě. Tato omezená mezinárodní záruka Polar byla vydána společností Polar Electro Oy pro spotřebitele, kteří si tento produkt zakoupili v jiné zemi.
- Společnost Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantuje původnímu spotřebiteli/kupci tohoto zařízení, že produkt nebude projevovat vady na materiálu či zpracování po dva (2) roky od data koupě.
- **Platební doklad z původní koupě je vaším důkazem o koupi!**
- Záruka se nevztahuje na baterii, běžné opotřebení, poškození v důsledku nesprávného použití, zneužití, nehody či nerespektování bezpečnostních opatření; nesprávné údržby, komerčního použití, na rozbité či poškrábané obaly/displeje, elastický popruh a vybavení Polar.
- Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození, ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, zvláštní, vyplývající z produktu či v souvislosti s ním.
- Na položky zakoupené z druhé ruky se dvouletá (2 roky) záruka nevztahuje, pokud není jinak stanoveno místními zákony.
- Během záručního období bude produkt opraven či vyměněn v jakémkoliv servisním centru Polar bez ohledu na stát, v němž byl původně zakoupen.

Záruka vztahující se na veškeré produkty bude omezena na státy, v nichž byl produkt původně uveden na trh.

CE 0537;0889

Tento produkt odpovídá standardům Směrnice 93/42/EHS a 1999/5/ES. Příslušné prohlášení o shodě naleznete na webové stránce www.polar.fi/support.

Informace o právních předpisech jsou dostupné na adrese www.polar.fi/support.



Tento přeškrtnutý odpadový kontejner na kolečkách značí, že produkty společnosti Polar jsou elektronická zařízení a spadají pod Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a baterie a akumulátory používané v produktech spadají pod Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Tyto produkty a baterie/akumulátory uvnitř zařízení Polar by tedy měly být likvidovány v zemích Evropské unie odděleně.

Copyright © 2011 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finsko. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nelze použít či reprodukovat v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu společnosti Polar Electro Oy.

Názvy a loga v této příručce nebo v balení tohoto produktu jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Polar Electro Oy. Názvy a loga uvedená se symbolem ® v této příručce nebo v balení tohoto produktu jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Polar Electro Oy. Windows je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft Corporation a Mac OS je registrovaná obchodní známka společnosti Apple Inc.

Společnost Polar Electro Oy je společnost ověřená certifikátem ISO 9001:2008.

Prohlášení o zodpovědnosti

- Materiál v této příručce slouží pouze k informativním účelům. Produkty, které popisuje, mohou být bez předchozího upozornění změněny vzhledem ke kontinuálnímu rozvojovému programu výrobce.
- Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nečiní prohlášení nebo záruky týkající se této příručky nebo produktů v ní uvedených.
- Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy neodpovídá za žádné škody, ztráty, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, následné či zvláštní, týkající se či vyplývající z použití tohoto materiálu nebo produktů v něm uvedených.

Tento produkt je chráněn jedním či několika následujícími patenty: FI23471, USD49278S, USD492784S, USD492999S, FI68734, US4625733, DE3439238, GB2149514, HK81289, FI88972, US5486818, DE9219139.8, GB2258587, FR2681493, HK306/1996, FI96380, WO95/05578, EP665947, US5611346, JP3568954, DE69414362, FI4150, US6477397, DE20008882, FR2793672, ES1047774, FI112844, EP724859B1, US5628324, DE69600098T2, FI110915, US7324841, EP1361819, FI23471, US D492999SS, EU0046107-002, EU0046107-003. Další patenty jsou v řízení.

www.polar.fi

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY