
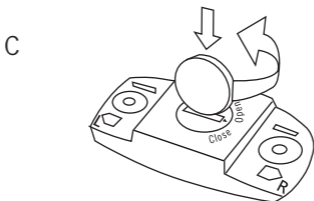
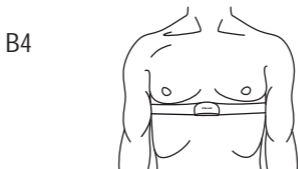
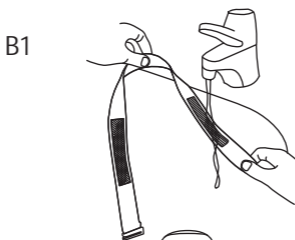


**Polar WearLink® +
Coded Transmitter 31
Coded Transmitter W.I.N.D.**

Upute za uporabu

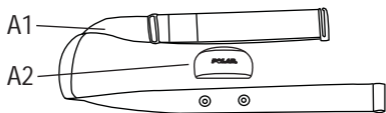

Ovaj korisnički priručnik sadrži upute za Polar WearLink® 31 i Polar WearLink® W.I.N.D. primopredajnike. Model vašeg primopredajnika je otisnut na priključku.

Molimo vas slijedite slike na prednjem omotu.

Zadnja inačica ovog korisničkog priručnika se može skinuti sa www.polar.fi/support. Za video upute, posjetite http://www.polar.fi/en/support/video_tutorials.

Dijelovi primopredajnika

1. Elektrode na stražnjoj strani pojasa detektiraju otkucaje srca. Slika A1.
2. Priključak šalje signal otkucaja srca u monitor srčane frekvencije. Slika A2.

Nošenje primopredajnika

1. Namočite područja elektroda pojasa tekućom vodom, te provjerite jesu li dobro namočena. Slika B1.
2. Fiksirajte priključak na pojas. Namjestite pojas da čvrsto naliježe ali da vam bude ugodno. Slika B2.
3. Povežite pojas oko vaših prsa, malo ispod prsnih mišića i zakačite na drugi kraj pojasa. Slika B3.
4. Provjerite prianjaju li mokra područja elektroda čvrsto na vašu kožu i da je Polar logotip priključka na sredini u uspravnom položaju. Slika B4.

Nakon svake uporabe skinite priključak s pojasa, te pojas isperite tekućom vodom.



Polar WearLink priključak se ne može koristiti sa specifičnom odjećom s ugrađenim elektrodama od mekane tkanine. Namočite elektrode i zakačite priključak na odjeću bez pojasa, s Polar logotipom u uspravnom položaju.

Uvođenje Polar WearLink W.I.N.D. primopredajnika u vaš monitor srčane frekvencije

Vaš novi WearLink W.I.N.D. primopredajnik treba uvesti u vaš Polar monitor srčane frekvencije, kako bi mogao mjeriti otkucaje srca. To omogućuje vježbanje u grupi bez smetnji od drugih senzora.

Monitor srčane frekvencije i primopredajnik, kao set su već sinkronizirani. Kada pokrenete novi primopredajnik potrebno je provesti uvođenje.

Za dodatne informacije o uvođenju, pogledajte korisnički priručnik vašeg Polar monitora srčane frekvencije.

Briga i održavanje

Ovaj primopredajnik je sofisticirani instrument kojim se treba pažljivo rukovati. Slijedeće upute će vam pomoći da ispunite uvjete jamstva.

Nakon svake uporabe skinite priključak primopredajnika s pojasa i pojas isperite pod tekućom vodom. Priključak osušite s mekanim ručnikom. Nikada ne koristite alkohol ili bilo kakve abrazivne materijale (čelična vuna ili kemikalije za čišćenje).

Pojas redovito perite u perilici na 40°C ili barem nakon svake pete uporabe. To će osigurati pouzdana mjerenja i maksimalizira radni vijek primopredajnika. Koristite vrećicu za pranje. Nemojte je namakati, niti koristiti deterdžent s bjelilom niti omekšivač. Traku nemojte sušiti u sušilici niti je izbjeljivati. Nikada nemojte staviti priključak primopredajnika u perilicu ili sušilicu!

Osušite i spremite pojas i priključak odvojeno. Prije odlaganja na duže vrijeme i uvijek nakon uporabe, pojas operite u perilici i uvijek nakon uporabe u vodi s većim sadržajem klor.

Čuvajte primopredajnik na hladnom i suhom mjestu. Ne čuvajte ga u vlažnoj okolini, u materijalu koji ne popušta zrak, kao što je sportska torba. Znoj i vlaga uzrokuju da elektrode budu mokre i aktivirane. Ne ostavljajte ih duže vrijeme izložene direktnom sunčevom svjetlu.

Servis

Tijekom jamstvenog razdoblja, preporučamo da servisirate ovaj proizvod u ovlaštenom Polar servisnom centru. Jamstvo ne pokriva štetu nastalu neovlaštenim servisom. Pogledajte Ograničeno međunarodno Polar jamstvo.

Baterije

Ako želite samo zamijeniti bateriju, slijedite ispod danje upute. Vidi sliku C.

1. Koristeći kovanicu, otvorite poklopac baterije okrećući ga u smjeru obrnutom od kazaljke na satu u poziciju OPEN.
2. Ubacite bateriju (CR2025) u poklopac s pozitivnim (+) polom prema poklopcu. Provjerite je li prsten za brtvljenje u utoru kako bi osigurali otpornost na vodu.
3. Pritisnite poklopac nazad u priključak.
4. Koristeći kovanicu okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu u zatvorenu poziciju CLOSE.

Poklopac otvarajte samo u slučaju zamjene baterije kako bi osigurali dugotrajnost, te pazite da prsten za brtvljenje nije oštećen, te ga u tom slučaju morate zamijeniti s novim.

Kitovi baterija s prstenima za brtvljenje su dostupni u Polar maloprodajnim trgovinama i ovlaštenim polar servisnim centrima. U SAD i kanadi, prsteni za brtvljenje su dostupni samo u ovlaštenim Polar servisnim centrima.



Baterije držite dalje od djece. Ako se baterija proguta, odmah kontaktirajte liječnika. Baterije treba odložiti u skladu s lokalnim propisima.

Mjere opreza

Za informacije o alergijama, pogledajte navedene materijale u Tehničkim specifikacijama. Izbjegavajte reakcije kože tako da primopredajnik nosite preko majice, namočene u području elektroda.

Držite sredstvo protiv insekata dalje od primopredajnika.



Vlaga i abrazija mogu uzrokovati stvaranje mrlja na svijetloj odjeći.

Uporaba vašeg primopredajnika u vodi

Polar WearLink 31 primopredajnik se može koristiti tijekom plivanja, ali može doći do smetnji zbog slijedećih razloga:

- Morska voda i voda u bazenu su jako vodljive, te može doći do kratkog spoja elektroda, što sprečava da primopredajnik detektira signal otkucaja srca.
- Skakanje ili oštri pokreti mišića mogu pomaknuti primopredajnik tako da se ne mogu detektirati signali otkucaja srca.
- Jačina signala otkucaja srca je individualna i ovisi o sastavu tkiva.

Polar WearLink W.I.N.D. primopredajnik je vodootporan ali neće mjeriti otkucaje srca u vodi.

Tehničke specifikacije

Vrsta baterije:	CR 2025
Prsten za brtvljenje:	O-prsten 20.0x1.0 materijal FPM
Trajnost Polar WearLink 31 baterije:	Prosječno 2 godine (1 sat/dan, 7 dana/tjedno)
Trajnost Polar WearLink W.I.N.D. baterije:	Prosječno 2 godine (3 sat/dan, 7 dana/tjedno)
Radna temperatura:	-10°C do +50°C
Materijal priključka:	Poliamid
Materijal pojasa:	35% poliester, 35% poliamid, 30% poliuretan

Ograničeno Polar međunarodno jamstvo

- Ovo jamstvo ne utječe na prava kupca koja su propisana nacionalnim ili državnim zakonima, ili na prava kupca u odnosu na prodavača koja proizlaze iz ugovora o kupnji.
- Ovo ograničeno Polar međunarodno jamstvo izdaje kompanija Polar Electro Inc. kupcima koji su kupili ovaj proizvod u SAD ili Kanadi. Ovo ograničeno Polar međunarodno jamstvo izdaje kompanija Polar Electro Oy kupcima koji su kupili ovaj proizvod u drugim državama.
- Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. jamči originalnim kupcima ovog proizvoda da proizvod neće imati nikakve defekte materijala ili izrade na dvije (2) godine od datuma kupnje.
- **Molimo vas čuvajte vaš račun, koji je dokaz vaše kupnje!**
- Jamstvo ne pokriva bateriju, oštećenja zbog krive uporabe, nezgoda ili nepoštivanje upozorenja; nepravilno održavanje, uporabu u komercijalne svrhe, napuknuta ili potrgana kućišta/zaslone, elastične pojaseve i Polar odjeću.

- Jamstvo ne pokriva bilo kakva oštećenja, gubitke, troškove, direktne ili indirektne, posljedične ili specijalne, koji su nastali ili povezani s proizvodom.
- Rabljeni proizvodi nisu pokriveni dvogodišnjim (2) jamstvom, osim ako nije drugačije propisano zakonom.
- Tijekom jamstvenog razdoblja, proizvod će biti popravljen ili zamijenjen u ovlaštenom servisu, bez naplate, te bez obzira na zemlju u kojoj je kupljen.

Jamstvo, za bilo koji proizvod, će biti ograničeno na države u kojima je proizvod u početku oglašavan.

CE 0537

Ovaj proizvod je sukladan Direktivi 93/42/EEC i 1999/5/EC. Za odgovarajuću Izjavu o sukladnosti posjetite www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.html.



Ovaj znak prekriženog koša za otpad ukazuje na to da su Polar proizvodi elektronski uređaji i da spadaju pod Direktivu 2002/96/EEC Europskog parlamenta i Vijeća za električki otpad i elektronsku opremu (WEEE), a baterije i akumulatori korišteni u proizvodima su pokriveni Direktivom 2006/66/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. u svezi baterija i akumulatora, te potrošnih baterija i akumulatora. Stoga se u Europskim državama ovi proizvodi i baterije/akumulatori moraju odvojeno odlagati.



Ova oznaka znači da je proizvod zaštićen od električkog udara.

Pravo kopiranja © 2010 Polar Electro Oy.
FIN-90440 KEMPELE, Finska

Polar Electro Oy je kompanija koja posjeduje certifikat ISO 9001:2000.

Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog priručnika se ne smije koristiti ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Polar Electro Oy. Nazivi i logotipi označeni simbolom TM u ovom priručniku ili na pakiranju proizvoda su tržišne oznake kompanije Polar Electro Oy. Nazivi i logotipi označeni s simbolom [®] u ovom priručniku ili na pakiranju proizvoda su registrirani tržišni znak kompanije Polar Electro Oy, osim Windows koji je registrirani tržišni naziv kompanije Microsoft Corporation.

Pravna izjava

Materijal u ovom priručniku služi samo za informaciju. Proizvodi koje opisuje su podložni promjenama bez prethodne najave, zbog stalnog programa razvoja proizvođača.

Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ne daje nikakva jamstva u odnosu na ovaj priručnik ili na u njemu opisan proizvod.

Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ne preuzima odgovornost za oštećenja, gubitke, troškove, direktne ili indirektne, posljedične ili specijalne, koji proizlaze ili su povezani s uporabom ovog materijala ili u njemu opisanih proizvoda.

Ovaj proizvod je zaštićen jednim od slijedećih patenata: FI23471, USD49278S, USD492784S, USD492999S, FI68734. US4625733, DE3439238, GB2149514, HK81289, FI88972, US5486818, DE9219139.8, GB2258587, FR2681493, HK306/1996, FI96380, WO95/05578, EP665947, US5611346, JP3568954, DE69414362, FI4150, US6477397, DE20008882, FR2793672, ES1047774, FI112844, EP724859B1, US5628324, DE69600098T2, FI110915. Vrijede i drugi patenti.

www.polar.fi

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR®
LISTEN TO YOUR BODY